

Strumenti Endodontici



Strumenti a conicità crescente

- rapida e precoce eliminazione delle interferenze coronali con accesso diretto e agevolato al terzo apicale;
- preparazione più veloce e più efficiente;
- possibilità di sagomare il canale nel modo più adeguato alla tecnica di otturazione desiderata, evitando l'uso delle frese di Gates;
- maggior spazio per le soluzioni irriganti.

Scarsa o nulla tendenza all'avvitamento, così da controllare l'avanzamento senza rischi.

Ottima efficienza di taglio laterale con movimenti di brushing o filing.

Aumento della flessibilità grazie agli ampi scarichi che riducono il volume negli strumenti più grandi.

Facile allontanamento dei detriti grazie alla rotazione continua.

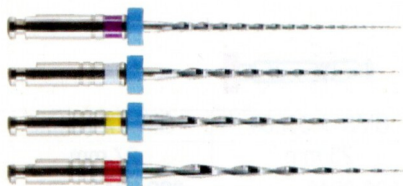

sweden & martina

Strumenti Endodontici

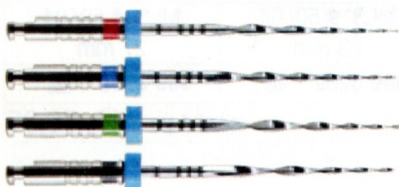


Gli strumenti Mtwo hanno una sezione trasversale a forma di S e due lame efficienti. Inoltre, Mtwo è progettato con contatto radiale minimo e flauti grandi e profondi per eliminazione continua verso l'alto dei residui della dentina. Questo design garantisce la flessibilità dello strumento e facilita la manutenzione della naturale curvatura del canale anche per preparazioni apicali più grandi (per esempio con un Mtwo 35 / .06). Vantaggio della parte lavorante di 21 mm. Marcature per l'identificazione facile dello strumento Il numero di anelli sull'albero indica la dimensione del cono dello strumento. Le marcature di profondità aiutano a controllare la lunghezza di lavoro durante la preparazione, a partire dalla punta dello strumento.

Vantaggi degli strumenti Mtwo: rimozione precoce delle ostruzioni nel canale coronale, utilizzando un diametro dello strumento più grande rispetto agli strumenti manuali ISO convenzionali. Maggiore conformazione conica per un'irrigazione efficiente. Nessun blocco degli strumenti.



SEQUENZA BASE					
Misura		Parte lavorante 16 mm		Parte lavorante 21 mm	
		21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04		5469 B 2 Z 15/22	5473 B 2 Z 15/22	5477 B 2 Z 15/22	5481 B 2 Z 15/22
15/.05		5470 B 2 Z 15/22	5474 B 2 Z 15/22	5478 B 2 Z 15/22	5482 B 2 Z 15/22
20/.06		5471 B 2 Z 15/22	5475 B 2 Z 15/22	5479 B 2 Z 15/22	5483 B 2 Z 15/22
25/.06		5472 B 2 Z 15/22	5476 B 2 Z 15/22	5480 B 2 Z 15/22	5484 B 2 Z 15/22



ALLARGAMENTO IN CASO DI AMPI CANALI				
Misura		Parte lavorante 16 mm		Parte lavorante 21 mm
		21 mm	25 mm	31 mm
25/.07		5485 B 2 Z 15/22	5488 B 2 Z 15/22	-----
30/.06		5486 B 2 Z 15/22	5489 B 2 Z 15/22	5492 B 2 Z 15/22
35/.06		5487 B 2 Z 15/22	5490 B 2 Z 15/22	5493 B 2 Z 15/22
40/.06		-----	5491 B 2 Z 15/22	5494 B 2 Z 15/22



SHAPING RIFINITURA APICALE				
Misura		Parte lavorante 16 mm		Parte lavorante 21 mm
		21 mm	25 mm	31 mm
30/.05		5495 B 2 Z 15/22	5498 B 2 Z 15/22	5501 B 2 Z 15/22
35/.04		5496 B 2 Z 15/22	5499 B 2 Z 15/22	5502 B 2 Z 15/22
40/.04		5497 B 2 Z 15/22	5500 B 2 Z 15/22	5503 B 2 Z 15/22

Assortimenti

La confezione assortita contiene 6 strumenti assortiti: 2 x 10/.04 + 2 x 15/.05 + 2 X 20/.06.

Misura	Parte lavorante 16 mm		Parte lavorante 21 mm
	21 mm	25 mm	25 mm
30/.05	5504 B 2 Z 15/22	5505 B 2 Z 15/22	5506 B 2 Z 15/22

La confezione assortita contiene 6 strumenti assortiti lunghezza totale 21 mm con parte lavorante 16 mm: 2 x 25/.06 + 1 x 30/.05 + 1 x 35/.04 + 1 x 40/.04 + 1 X 25/.07.

5507 B 2 Z 15/22

La confezione assortita contiene 6 strumenti assortiti lunghezza totale 25 mm con parte lavorante 21 mm 2 x 25/.06 e con parte lavorante 16 mm 1 x 30/.05 + 1 X 35/.04 + 1 X 40/.04 + 1 X 25/.07.

5508 B 2 Z 15/22

Sistema per la ripresa dei trattamenti endodontici. - Efficace: lime con punte attive 25/.05 e 15/.05. - Sicuro: lime con punte non attive 25/.07.

5509 B 2 Z 15/22

Conf: 6 pz Listino € 83,50

Per l'acquisto di 3 pz €51,00 cd

Per l'acquisto di 5 pz €48,50 cd